

Universaloptikhalter Universal Optic Holders

UNOH 65

65

9012.0342 / 18.07.2014

- SYS 65 kompatibel
- verzugsarmes Aluminium
- reflexionsarm, schwarz eloxiert
- Haltearme aus POM
- für Optiken von \varnothing 22 mm bis 51 mm
- Montagemöglichkeiten
 - auf Reiter RT 65
 - auf Stift
- for use with SYS 65
- deformation-resistant aluminium
- reflection-poor, black anodized
- holding arms made of POM
- for optics from \varnothing 22 mm up to 51 mm
- ways of installing
 - on slide RT 65
 - on pin



Die Universaloptikhalter UNOH 65 bringen genau die Flexibilität in jedes Optiklabor, die für effektives Arbeiten benötigt wird. Zudem ermöglichen sie zeitsparendes Arbeiten, da ein kompletter Aus- und Einbau unterschiedlicher Halter überflüssig wird.

Die Halter sind für gefasste und ungefasste Optiken mit \varnothing 22 mm bis \varnothing 51 mm geeignet. Sie sind flexibel auf Reiter RT 65 in SYS 65 oder auf Stifte montierbar.

Die Bedienung der UNOH ist sehr einfach. Ein kleiner Hebel wird zurückgeschoben und damit die Arme geöffnet, die Optik wird nun eingelegt. Danach wird der Hebel losgelassen und die Ärmchen umschließen die Optik und setzen diese sicher mittig in den Strahl.

The universal optic holders UNOH 65 offer the flexibility which is a prerequisite for efficient work in every optics laboratory. Moreover, they lead to significant time savings, as a complete removal and installation of different holders is not required any more.

The holders are capable to carry mounted and unmounted optics with \varnothing 22 mm up to 51 mm. They can be mounted on both slides RT 65 for use with SYS 65 or on pins.

The handling of the UNOH is simple: A small lever is pushed back, the arms open and the optic can be inserted. By releasing the lever, the arms enclose the optic and put them securely centered in the beam.

Bestellangaben/Ordering Information





Universaloptikhalter/Universal Optic Holders

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Universaloptikhalter für Optiken mit \varnothing 22 mm bis 51 mm	universal optic holders for optics from \varnothing 22 mm up to 51 mm	UNOH 65	16.105.2251

Zubehör/Accessories

Reiter RT 65, 20 mm, mit Rändelschraube	slide RT 65, 20 mm, with knurled screw	RT 65-20-R	16.021.0020
Reiter RT 65, 20 mm, mit Innensechskantschraube	slide RT 65, 20 mm, with hexagon socket head cap screw	RT 65-20-M3	16.022.0020
Stift 15	pin 15	s. Produktinfo STF 15/s. product info STF 15	

UNOH65

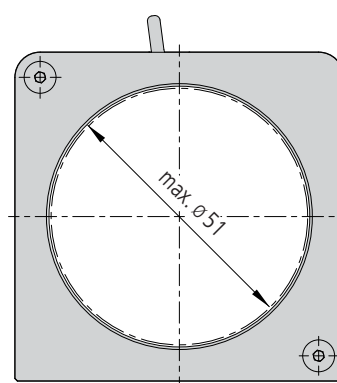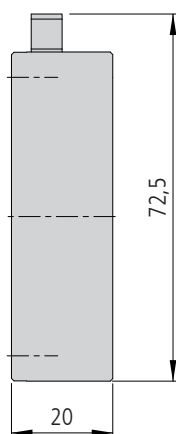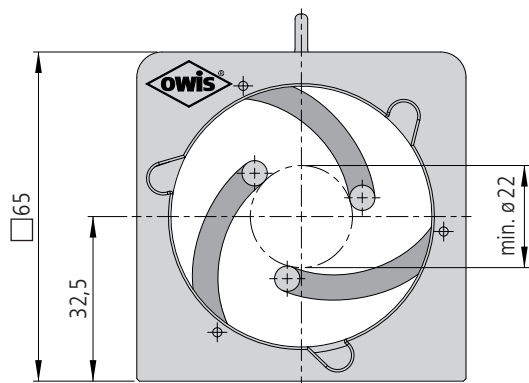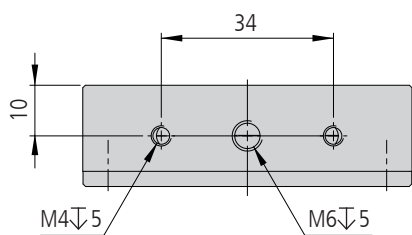

UNOH65

Technische Daten/Technical Data UNOH65

Aufnahmedurchmesser	retainer	ø 22 – 51	mm
Gewicht	weight	110	g